

# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ ΑΥΧΕΝΑ

## ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

### ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ

Αν επιθυμείτε να προσαρμόσετε τα κουμπιά ενώ δουλεύει η συσκευή, πιάστε μια φορά για να κλείσει. Πιέστε ξανά για να ανοίξει.

### ON/OFF

Χρόνος λειτουργίας: 15 λεπτά


Μετά τα 15 λεπτά χρήσης η συσκευή κλείνει.

### ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μπορείτε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση.

Χρησιμοποιείται αποτελεσματικά σε συγκεκριμένες περιοχές.

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μασάζ σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.

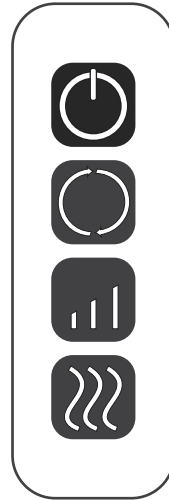

Διακόπτης On/Off

Κατεύθυνση μασάζ

Έλεγχος ταχύτητας

Θέρμανση On/Off

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, εγκαύματος, ηλεκτροπληξίας ή άλλου είδους τραυματισμού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βγάλτε την από την πρίζα.
2. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή άλλον τραυματισμό μην χρησιμοποιείται τη συσκευή πάνω σε μαξιλάρια, κουβέρτες ή άλλα υφασμάτινα προϊόντα.
3. Μετά τη χρήση να αφαιρείται από την πρίζα. Μην τραβάτε απότομα το καλώδιο.
4. Αν η συσκευή πέσει στο νερό μην την αγγίξετε, αφαιρέστε την από την πρίζα πρώτα.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο.
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλο υγρό προϊόν.

## ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣΑΖ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

- Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, χαλαρώνει το σώμα, εξαλείφει την κούραση και ανακουφίζει από διάφορους πόνους.
- Βελτιώνει τη λειτουργία του σώματος. Το μασάζ αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και μέσω αυτού παρέχει πιο γρήγορα στον οργανισμό όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του.